



Bi-Prone

Set di **POSIZIONAMENTO PRONO MONOUSO**
per terapia intensiva



- + COMFORT
- + MODULARITÀ
- + EFFICACIA DEL TRATTAMENTO

POSIZIONATORI TERAPIA INTENSIVA

www.biomatrix.it



+NEW




SET **SO06841**

Set di POSIZIONAMENTO PRONO MONOUSO per terapia intensiva



EXTRA
MODULARE
EXTRA
TRASPIRANTE

Progettato per affrontare le sfide specifiche della sicurezza del paziente in Unità di Terapia Intensiva, **SO06481** rappresenta la nostra soluzione per il *posizionamento prolungato*, offrendo protezione avanzata contro le *lesioni da pressione acquisite a causa del decubito prono*, assicurando il massimo comfort, riducendo le complicanze associate all'immobilità prolungata e contribuendo attivamente a prevenire il deterioramento cutaneo.

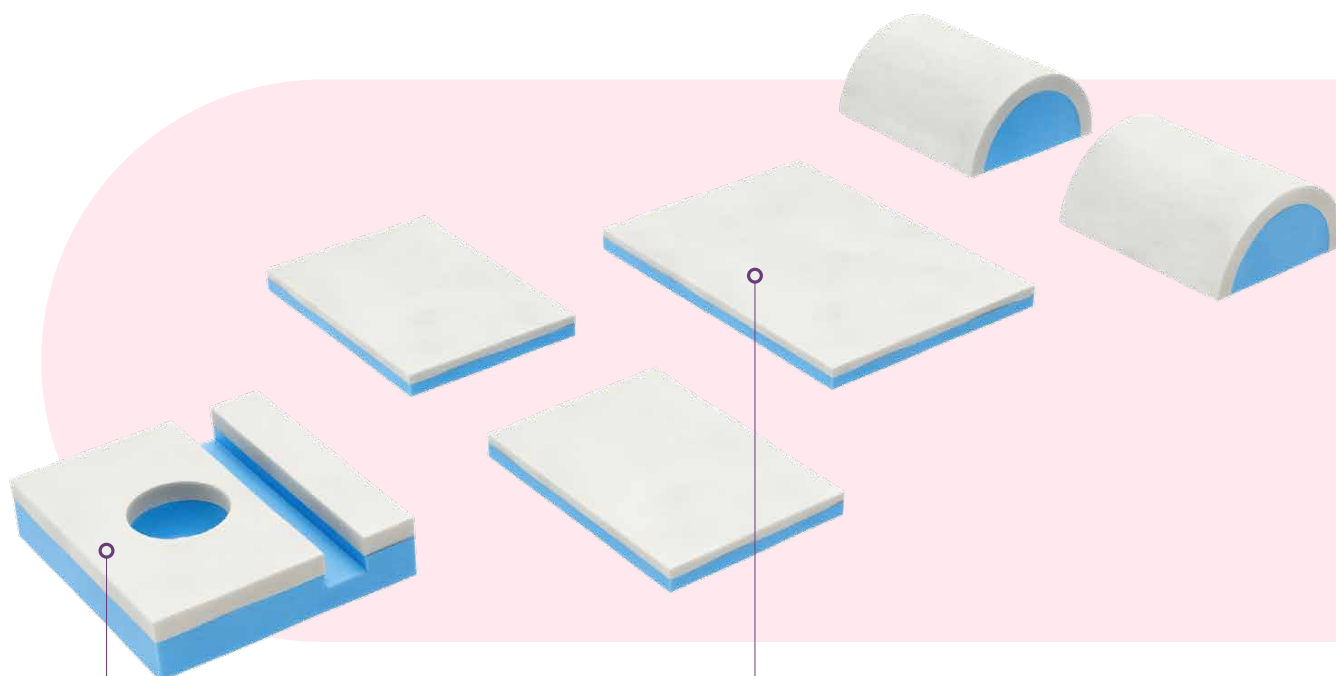

Superficie **VISCOELASTICA IN MEMORY FOAM**

Progettata per garantire una distribuzione uniforme della pressione, soprattutto durante periodi prolungati di immobilità.


Design ergonomico dei **SINGOLI DISPOSITIVI MEDICI**

Studiato per rispondere alle esigenze specifiche del posizionamento in terapia intensiva, assicurando stabilità, sicurezza e adattabilità ai diversi distretti corporei.

Supporto viscoelastico per la distribuzione della **PRESSIONE E LA PREVENZIONE DELLE ULCERE**

SO06841 è un set che appartiene alla linea Bi-Prone.

Realizzato con materiali avanzati traspiranti, delicati sulla pelle e altamente assorbenti, ideali per **ridurre il rischio di macerazione e mantenere la cute asciutta**.

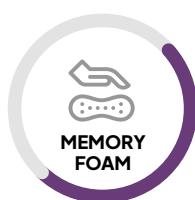

POSIZIONE DI DECUBITO PRONO

SO06841 si presenta come un set completo preconfigurato, preassemblato e modulare, con componenti pensati per la specifica posizione di decubito prono, dedicati in modo particolare alle prominenze ossee e/o aree del paziente soggette a ulcere da pressione causate dalla degenza ospedaliera.




I singoli dispositivi medici che compongono il set possono essere regolati, allineati e posizionati in base all'anatomia del paziente o al protocollo ospedaliero.

Il set è interamente **MONOUSO** e può essere utilizzato monopaziente per tutta la durata del trattamento, eliminando i tempi di sanificazione, semplificando la gestione logistica e apportando alti livelli di garanzia igienica.


SO02840 Appoggiatesta laterale prono con incavo

La posizione prona favorisce il ristagno di liquidi nella parte anteriore del corpo, con conseguente gonfiore di viso, labbra, lingua e palpebre. La **pressione prolungata sul bulbo oculare, fronte, mento e guance, orecchio rende necessario l'uso di un dispositivo di sostegno**, che offra stabilità, comfort, distribuisca omogeneamente il peso e la pressione, garantendo controllo termico. L'appoggiatesta laterale è realizzato con un incavo integrati per tubo endotracheale (ET-Tube), per mantenere le vie aeree libere da ostruzioni.

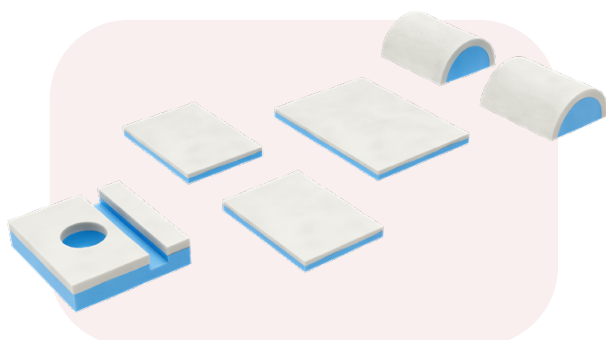

SO02840

Appoggiatesta laterale prono con incavo
cm 27x25x6

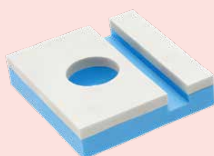

SO02823 (2X)

Posizionatore mezzo rullo
cm 23x20x10



SO02823 (2x)

Posizionatore mezzo rullo

Durante il posizionamento ed immobilità prolungate, assicura **protezione e supporto per talloni, dorso dei piedi, ginocchia, mantenendo l'integrità cutanea nelle zone a maggiore rischio di sviluppare lesioni da pressione**. Può essere utilizzato anche per collo, torace e torso, a seconda dei requisiti procedurali e/o dell'anatomia del paziente.

SO02841 cm 28x38

Lastra di supporto memory foam


SO02842 (2x) cm 20x28

Lastra di supporto memory foam

Le lastre di supporto in schiuma viscoelastica memory foam proteggono le aree a maggior rischio di lesioni da decubito (prominenze ossee quali ginocchia, gomiti, etc...) e, grazie allo strato superiore ad alta densità, **migliorano la distribuzione del peso e della pressione, assicurando allo stesso tempo protezione cutanea**. Grazie al design flessibile e alle diverse misure disponibili, le lastre di supporto si possono adattare a diverse necessità di posizionamento.


SO02841

Lastra di supporto memory foam
cm 28x38

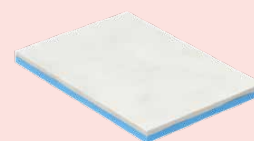

SO02842 (2X)

Lastra di supporto memory foam
cm 20x28

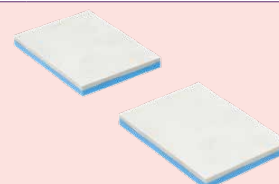

BioMatrix

Quartiere Longo, 19
29010 • Castelvetro Piacentino (PC) • Italy
Tel. + 39 0523.826619
info@biomatrix.it • www.biomatrix.it



Tutti i diritti sono riservati. Variazioni possono essere apportate senza obbligo di preavviso. BioMatrix S.r.l non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questa sede.

www.biomatrix.it